

Système de blanchiment professionnel de dents au moyen d'une gouttière. Conserver dans un endroit frais a l'abri de la lumière. Ne pas congeler. Contient du peroxyde d'hydrogène. Tenir hors de portée des enfants.

Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Ne pas utiliser chez les enfants/adules cents âgés de moins de dix-huit ans. Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée unique ment par des praticiens de l'art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation. Avec le système de blanchiment Omni White smile vous pouvez éclaircir vos dents de façon effective et sûre. Sans aucun dommage de la structure des dents. La méthode est recommandée par les dentistes. Attention : les prothèses dentaires comme les couronnes, les bridges et les plombages ne peuvent être éclaircies. Un détartrage dentaire professionnel est recommandé avant le blanchiment des dents. De plus, il est conseillé d'avoir des dents saines et sans caries. Si vous avez plus de questions ou un doute, adressez-vous à votre dentiste.

Le gel de blanchiment Omni White smile est disponible en différentes concentrations : plus le taux de peroxyde de carbamide est élevé, plus le temps de pose sera court. Le traitement peut être effectué de nuit comme de jour, avec un temps de pose de 1 à 4 heures et devrait s'étaler sur 5 à 10 jours.

Concentration peroxyde de carbamide	Temps minimum d'application	Temps d'utilisation recommandé	Pour un résultat optimal	Indications
10% CP (~ 3,5% HP)	2 heures	4 heures ou durant la nuit	5-10 applications	Coloration légère ou moyenne, dents sensibles
16% CP (~ 5,6% HP)	1 heure	3 heures ou durant la nuit	4-8 applications	Coloration légère ou moyenne, dents sensibles

Temps recommandés de traitement

Les temps indiqués sont seulement des recommandations. Un plus long temps d'usage par session est possible et peut réduire le nombre d'applications. En cas de sensibilités plus peu de temps d'usage des plateaux avec plus d'applications est recommandé et par la suite une concentration inférieure de gel de peroxyde de carbamide.

Comment parvenir aux meilleurs résultats

- Brossez-vous minutieusement les dents !
- Sortez la seringue de l'emballage et retirez le capuchon de l'embout.
- Pour chaque dent que vous voulez éclaircir, remplissez les gouttières d'une goutte du gel (ill. 1). Placez alors la gouttière remplie sur la dentition (ill. 2). Avec une seringue vous pouvez remplir 6 à 8 gouttières.
- Brossez-vous minutieusement les dents après le blanchiment des dents. Nettoyez les gouttières avec de l'eau.
- Directement après le blanchiment des dents, évitez 4 heures de consommer des aliments, boissons ou substances colorés comme le café, le thé, le vin rouge ou les cigarettes.

Effets secondaires possibles

Sensibilité des dents accrues, irritation de la gencive, nausée, maux de tête. Tous ces symptômes ne sont que temporaires et disparaissent 1 à 3 jours après l'arrêt du traitement.

Mise en garde

Evitez tout contact avec les muqueuses, les yeux et la peau. En cas de contact accidentel, rincez abondamment la zone atteinte avecde l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune recherche pour tous les types de patients : ainsi l'utilisation du traitement est déconseillée pendant la grossesse, au cours de l'allaitement ainsi.

Sistema di sbiancamento professionale con mascherine personalizzate. Conservare in luogo fresco ed al riparo dalla luce. Contiene perossido di idrogeno. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto. Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni. Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo. Con il kit per lo sbiancamento Omni White smile potete sbiancare i vostri denti in modo efficace e sicuro senza danneggiarli. Considerate che corone, ponti e restauri non beneficeranno dello sbiancamento. Si raccomanda una PULIZIA PROFESSIONALE prima dell'utilizzo del prodotto. I denti dovrebbero essere in buono stato senza cavità. Se avete delle domande chiedete pure al vostro dentista.

Il gel sbiancante Omni White smile Gel è disponibile in varie concentrazioni. Maggiore sarà la concentrazione utilizzata, minori saranno i tempi di applicazione. Il trattamento può essere fatto di notte nel sonno o di giorno con applicazioni di 1-4 ore. Il trattamento dovrebbe essere ripetuto per 5-10 giorni.

Concentrazione di Perossido di Carbammide	Tempo minimo di applicazione	Tempo di applicazione consigliato	Risultato ottimale dopo	Indicazioni
10% CP (~ 3,5% HP)	2 ore	4 ore o durante la notte	5-10 applicazioni	Sbiancamento leggero-medio denti sensibili
16% CP (~ 5,6% HP)	1 ore	3 ore o durante la notte	4-8 applicazioni	Sbiancamento leggero-medio denti sensibili

Tempi di trattamento raccomandati

In tabella ci sono i tempi di applicazione raccomandati. È possibile utilizzare tempi più lunghi per ogni seduta e ridurre il numero delle sedute. In caso di sensibilità si raccomanda un numero maggiore di applicazioni più brevi e, possibilmente, una minore concentrazione di Perossido di Carbammide.

Come ottenere il massimo risultato

- Lavare i denti e passare il filo interdentale.
- Prendere dal kit una siringa e rimuovere il cappuccio.
- Mettere una piccola goccia di WHITESmile Gel per ogni spazio dentale nelle mascherine (Immagine 1). Metti le mascherine sulle arcate dentali (Immagine 2). Una siringa riempie approssimativamente 6-8 mascherine.
- Dopo lo sbiancamento, rimuovere le mascherine, sciacquare e spazzolare il gel in eccesso dai denti e dalle gengive. Sciacquare le mascherine con acqua fredda e pulirle con uno spazzolino da denti.
- Per almeno 4 ore dopo lo sbiancamento, astenersi dal consumare thè, caffè, vino rosso, sigarette ecc. per evitare che gli effetti del trattamento siano ridotti.

Possibili effetti collaterali

Sensibilità dei denti, irritazione delle gengive, nausea, mal di testa. I sintomi sono temporanei e dovrebbero cessare in 1-3 giorni dall'ultimo utilizzo del prodotto.


Avvertenze

Evitare il contatto con l'interno della bocca, occhi e pelle. Se ci fosse un contatto accidentale, sciacquare la parte coinvolta con acqua abbondante. Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e richiedere assistenza medica. Omni White smile non consiglia il trattamento sbiancante a donne incinte, in allattamento o di età inferiore a 18 anni.



- DE Information für den Patienten
- EN Information for the Patient
- FR Information pour le patient
- IT Informazioni per il paziente

HOME BLEACHING
OMNI
WHITE SMILE

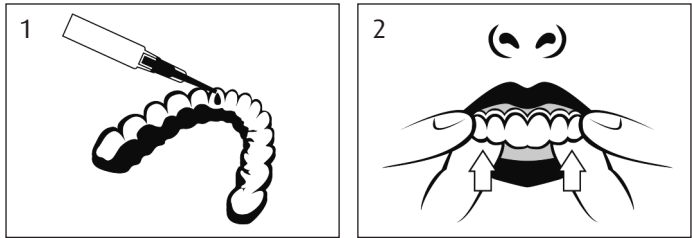

System zur Zahnaufhellung mit individuellen Bleaching-Schienen. Kühl und trocken lagern. Material darf nicht gefroren werden. Enthält Wasserstoffperoxid. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kontakt mit den Augen vermeiden. Sofort Augen spülen, falls das Erzeugnis mit den Augen in Berührung gekommen ist. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anwenden. Darf nur an Zahnärzte abgegeben werden. In jedem Anwendungszyklus muss die erste Anwendung stets einem Zahnarzt vorbehalten sein oder unter dessen direkter Aufsicht erfolgen, falls ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach muss das Mittel dem Verbraucher für den verbleibenden Anwendungszyklus bereitgestellt werden. Mit dem Omni White smile Zahnaufhellungssystem können Sie Ihre Zähne auf effektive und zugleich schonende Weise aufhellen. Zahnärzte empfehlen dieses System, weil eine Schädigung der Zahnschicht ausgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass Zahnersatz wie Kronen, Brücken und Füllungen nicht aufgehellert werden kann. Eine professionelle Zahnreinigung vor der Zahnaufhellung ist zu empfehlen. Außerdem sollten Ihre Zähne in gutem Zustand sein und keine Karies aufweisen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.

Omni White smile Zahnaufhellungsgel ist in verschiedenen Konzentrationen erhältlich: Je höher der Carbamid-Peroxid-Anteil im Gel, desto kürzer die Tragezeit der Zahnschienen. Die Behandlung kann über Nacht oder tagsüber mit einer Tragezeit von 1–4 Stunden erfolgen und sollte sich über 5–10 Tage erstrecken.

Carbamid-Peroxid Konzentration	Mindest-tragedauer	Empfohlene Tragedauer	Beste Ergebnisse bei normaler Verfärbung	Indikationen
10% CP (~ 3,5% HP)	2 Stunden	4 Stunden oder über Nacht	5–10 Anwendungen	geringe / normale Verfärbung, empfindliche Zähne
16% CP (~ 5,6% HP)	1 Stunde	3 Stunden oder über Nacht	4–8 Anwendungen	geringe / normale Verfärbung, empfindliche Zähne

Empfohlene Tragedauer der Schienen

Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte. Eine Verlängerung der Tragezeiten ist unbedenklich und kann die Anzahl der notwendigen Anwendungen reduzieren. Bei Auftreten von Sensitivitäten ist eine häufigere Anwendung mit geringerer Tragedauer und eventuell geringerer Materialkonzentration zu empfehlen.

Einige Hinweise für beste Ergebnisse

- Vor der Anwendung Zähne gründlich putzen!
- Nehmen Sie die Spritze aus der Packung und drehen Sie die Kappe der Kanüle ab.
- Füllen Sie für jeden Zahn, den Sie aufhellen wollen, einen Tropfen in Linsengröße des Gels in die Zahnschiene (Abb. 1). Setzen Sie nun die gefüllten Zahnschienen über die Zahnreihen (Abb. 2). Eine Spritze reicht für ca. 6–8 Schienenfüllungen aus.
- Putzen Sie die Zähne nach der Zahnaufhellung gründlich. Spülen Sie die Zahnschienen mit kaltem Wasser gut aus.
- Direkt nach der Zahnaufhellung sollten Sie den Konsum von färbenden Stoffen, z.B. Kaffee, Tee, Rotwein oder Zigaretten für mindestens 4 Stunden vermeiden.

Nebenwirkungen

Gelegentlich erhöhte Empfindlichkeit der Zähne. In seltenen Fällen: Schmerzhafte Empfindlichkeit der Zähne, Fleckenbildung auf den Zähnen, Irritationen des Zahnfleisches. Alle Nebenwirkungen sind vorübergehender Natur und klingen 1–3 Tage nach Beendigung der Anwendung wieder ab.

Warnhinweise

Vermeiden Sie den Kontakt mit Schleimhäuten, Augen und Haut. Bei versehentlichem Kontakt die betroffenen Regionen mit viel Wasser spülen. Im Falle eines Kontakts mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Omnident rät von einer Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ab.

Tooth Whitening System for use in customized trays. Store in a cool, dark place. Do not freeze. Contains hydrogen peroxide. Keep out of the reach of children.

Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them. Not to be used on a person under 18 years of age. To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use. With Omni White smile you can whiten your teeth in a safe and effective way without causing damage.

Please be aware that crowns, bridges and fillings will not benefit from any bleaching procedure. A professional tooth cleaning is recommended before using this product. The teeth should be in good condition and without cavities. Please consult your dentist if you have questions.

Omni White smile is available in various concentrations. The higher the carbamide peroxide content is, the shorter the treatment time. The treatment can be done overnight or for 1–4 hours during the day. The treatment should be repeated over 5–10 days.

Carbamide-Peroxide concentration	Minimum time of application	Recommended time of use	Best result for regular discolouration	Indications
10% CP (~ 3,5% HP)	2 hours	4 hours or overnight	5–10 applications	Minor to regular discolouration, sensitive teeth
16% CP (~ 5,6% HP)	1 hour	3 hours or overnight	4–8 applications	Minor to regular discolouration, sensitive teeth

Recommended Treatment times

The indicated times are only recommendations. A longer wear time per session is possible and can reduce the number of applications. In case of sensitivity a shorter wear-time of the trays with more applications is recommended and possibly a lower concentration of carbamide peroxide gel.

How to achieve maximum results

- Brush and floss your teeth.
- Take one syringe out of the box and remove the cap from the dispensing tip.
- Place a small drop of Omni White smile Gel into each tooth compartment (Pic.1). Place the filled trays on your teeth (Pic.2). One syringe fills approximately 6–8 trays.
- After whitening, remove the trays, rinse and brush excess gel from your teeth and gums. Rinse the trays with cold water and clean gently with a toothbrush.
- For at least 4 hours after bleaching, please refrain from consuming tea, coffee, red wine, cigarettes etc. as this will reduce the effectiveness of the treatment.

Possible side effects

Tooth sensitivity, gum irritation, nausea, headache. Symptoms are temporary and should subside in 1–3 days following termination of product use.

Warning

Avoid contact with the inside of the mouth, eyes and skin. If accidental contact occurs, rinse affected area generously with water. In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice. Omnident does not recommend bleaching treatments on people who are pregnant, lactating.

Ingredients:

Glycerin, Carbamide Peroxide, Carbomer, Disodium Pyrophosphate, Sodium Stannate, Dipotassium EDTA, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tromethamine, Aroma.



WHITHEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
D-69488 Birkenau



OMNIDENT Dental-
Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau